

RELSIB Wx52

Замена элемента питания

- 1. Подденьте резиновое уплотнительное кольцо с помощью острой части ключа и снимите его
- 2. Поместите прибор в силиконовый держатель с вакуумной присоской и вставьте ключ в углубления на корпусе прибора как показано на рисунке

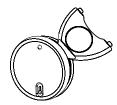

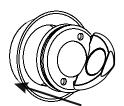

RELSIB Wx52

Смена элемента питания

3. Прижмите прибор в сили- 4. Снимите крышку коновом держателе к ладони батарейного отсека и поверните ключ против часовой стрелки пока не услышите характерный щелчок

5. Извлеките элемент питания и установите на его место новый







После замены элемента питания, соберите прибор повторив все пункты в обратной последовательности